

AGELOC WELLSPA iO SYSTEM

Az ageLOC WellSpa iO rendszer többet nyújt azokból az előnyökből, amelyekre mindenkinek szüksége van a jóllét eléréséhez. Egy személyre szabott szépségápoló, wellness és testápoló készülékrendszer, amely segít a revitalizálásban, a helyreállításban és a lazításban, hogy a lehető legjobban nézz ki és úgy is érezd magad!



ISMERD MEG AZ AGELOC WELLSPA IO RENDSZERT

Üdvözlünk az önápolás jövőjében! Az ageLOC WellSpa iO System az okos önápolás révén teszi láthatóan feszesebbé a bőrt.

A rendszer három fő rutinra épül: revitalizálás (Revitalise), helyreállítás (Restore) és lazítás (Relax). Válaszd akár bőröd **revitalizálását**, hogy visszanyerd az önbizalmadat, a **helyreállítást**, hogy jól érezd magad, vagy a **lazítást** az edzés vagy egy hosszú nap után, az ageLOC WellSpa iO rendszer segítségével újabb szintre emelheted szépségápolási és wellness rutinodat.

Ez az exkluzív készülékrendszer ageLOC termékekkel használatos, amelyek tudományosan bizonyított, látható eredményekkel szolgáló hatást nyújtanak, és tartozik hozzá egy IoT csatlakozású app, amely útmutatóként szolgál, illetve a készülék személyre szabott, adaptív mikroáram technológiával működik, amely a bőröd vezetőképességéhez igazítja az áram intenzitását, valós időben.

Engedd szabadjára önbizalmad az ageLOC WellSpa iO rendszer segítségével!

AMIÉRT SZERETJÜK

REVITALIZÁLÓ RUTIN

ageLOC WellSpa iO készülék + ageLOC Body Serum

- Revitalizálja a bőr megjelenését és megerősíti az önbizalmat.
- Ez a narancsbőrre megalkotott rutin segíti a bőr látható feszesítését és kontúrossá tételét a ragyogó, sima megjelenésért.
- Láthatóan feszesebbé és simábbá teszi a bőrt a combokon, a hason és a karokon a fiatalosabb megjelenés érdekében.
- Táplálja a bőrt a tiszta, bársonyos és egészséges megjelenésű bőr érdekében.
- Segít felszámolni a megereszkedett bőrt a tónusos, formás bőrért.
- Kiegyenlíti a bőrtónust a fényesebb, ragyogóbb bőr jegyében.
- Hidratálja a bőrt, és segít felszámolni a gödrös megjelenést.
- Az ageLOC összetevőknek köszönhetően célba veszi a bőröregedés látható jeleinek forrását a fiatalos külső megőrzése érdekében.

HELYREÁLLÍTÓ RUTIN

ageLOC WellSpa iO készülék + ageLOC Body Activating Gel

- Helyreállítja az általános közérzetet a jobb holisztikus wellness érdekében.
- Segít javítani a keringést a bőrrétegekben és a kötőszövetekben a készülék bőrön való mozgásának köszönhetően, amely masszírozza a bőrt.
- A masszírozó mozgás segíti a bőr sima megjelenését.
- Támogatja az általános kellemes közérzetet, hogy jól érezd magad, és jól is nézz ki.
- Segít, hogy kiegyensúlyozottabbnak érezd magad.
- Az ageLOC összetevőknek köszönhetően célba veszi a bőröregedés látható jeleinek forrását a fiatalos külső megőrzése érdekében.

ELLAZÍTÓ RUTIN

ageLOC WellSpa iO készülék + ageLOC Body Activating Gel

- Támogatja a testet, hogy jobban érezd magad edzések előtt és után.
- Edzés előtt kiváló kézi masszírozást nyújt, így izmaid felfrissülhetnek és felkészülhetnek az igénybevételre.
- Az edzést követően kézi masszázssal stimulálja a fájós izmokat és elősegíti a lazítást.
- Segít ellazulni és felfrissülni egy hosszú nap után.

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

- Felületi kialakítása sima, kellemes élményt nyújt.
- Az egyedülálló amerikai szabadalmaztatás alatt álló fémes domborulatok célja az áramáramlás optimalizálása és a sima, kényelmes kézi masszázs biztosítása, miközben hozzájárul a bőr stimulálásához. Kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a test vonalaihoz, és simán siklik a bőrön.
- A szabadalmaztatás alatt álló¹ adaptív kétfázisú pulzáló mikroáram folyamatosan, valós időben alkalmazkodik a bőrhöz – így a WellSpa iO használata mindig optimalizált és személyre szabott.
- A szilikon borítás tisztítása egyszerű; minimalizálja az ezzel járó rendetlenséget.

A NU SKIN VERA APP JELLEMZŐI

- Személyre szabja és kiegészíti a revitalizáló, helyreállító és pihentető rutinokat. A valós idejű útmutatóval segít minden lépésnél.
- Személyre szabott iO pontokkal segít fenntartani a motivációt és elérni a szépségápolási és wellness céljaidat.
- Szórakoztató ösztönző kitűzőkkel segít szemmel tartani a használatot.
- Megkönnyíti az újrendelést, hogy soha ne fogj ki a termékekből.
- Az alkalmazást és a készüléket is folyamatosan frissítésekkel optimalizáljuk.


¹ Az Egyesült Államokban és más piacokon, globálisan

Ez a dokumentum a Nu Skin munkatársai, valamint az európai (kiv. Ukrajna) és a dél-afrikai köztársaságbeli független Brand Affiliáté-ei számára készült. A nyilvánosság számára nem közzétehető. A Nu Skin európai és dél-afrikai köztársaságbeli piacain regisztrált védjegyek a www.nuskin.com honlap szójegyzékében található.

BIZONYÍTÓ EREJŰ KLINIKAI EREDMÉNYEK REVITALIZÁLÓ RUTIN

25-60 év közötti, enyhe vagy közepesen súlyos narancsbőrrel rendelkező nők vettek részt az ageLOC WellSpa iO vizsgálatában, amelyben a felső combon, a felső karon és/vagy a has területén használták a rendszert. Közülük 33-an a következő rutint alkalmazták: a fenti területeket az ageLOC Body Polish bőrradíros tusfürdővel tisztították és hámlasztották, majd a WellSpa iO készülékkel és az ageLOC Body Serummal heti háromszor három percig kezelték, és napi kétszer alkalmazták az ageLOC Dermatic Effects feszesítő testápolót. Minden egyes területet klinikai osztályozással és saját vélemény alapján értékelték a vizsgálat megkezdése előtt, majd a 2., a 4., a 8. és a 12. héten. A felső comb hátsó részét Cutometerrel is vizsgálták ugyanezekben az időpontokban.

A Cutometer combon mért eredményeit a bőr feszeségének és rugalmasságának tekintetében az alábbiakban mutatjuk be.

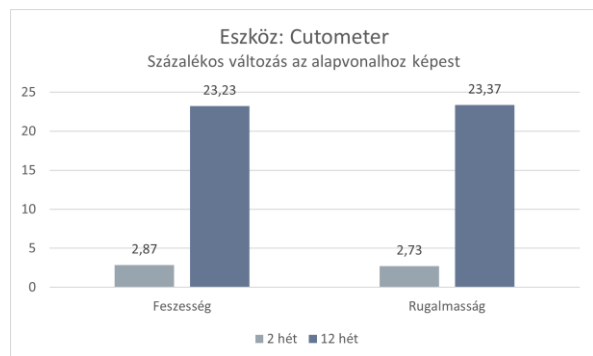

A klinikai osztályozó minden egyes területen felmérte a narancsbőr állapotát. Az alábbiakban láthatók a combon mért változások.



Az alanyok a bőrük megjelenésének javulását is megfigyelték az egyes területek következő tulajdonságaiban:

- Narancsbőr
- Feszesség
- Kontúr
- Általános megjelenés
- Egyenletesség
- Hidratáltság
- Feszesség

Ugyanebben a vizsgálatban egy másik, 32 nőből álló csoport, akik szintén a revitalizáló rutint követték, az ageLOC WellSpa iO készüléket és az ageLOC Body Serumot sűrűbben használták (maximum heti 5-ször, testrészenként 5 perc), és kutatásunk kimutatta, hogy ezzel a fokozott használattal gyorsabban megjelennek a látható eredmények, illetve 12 hét alatt még jobb eredmények érhetők el.

HASZNÁLAT

Használat előtt kérjük, lapozd fel ismerkedj meg az ageLOC WellSpa iO rendszer kézikönyvével a biztonsági információkért és a Vera alkalmazással a használati utasításokért. Mindegy, melyik rutint választod, luxus minőségű, bőrön hagyható termékeinket ageLOC összetevőkkel alkottuk meg, amelyek a bőröregedés látható jeleit veszik célba, a fiatalos külső megőrzése érdekében.

REVITALIZÁLÓ RUTIN

ageLOC Body Polish + ageLOC WellSpa iO készülék + ageLOC Body Serum + ageLOC Dermatic Effects

Használd hetente három alkalommal vagy akár napi rendszerességgel. Tusolj le az ageLOC Body Polish testradírozós tusfürdővel, törölközz meg, majd alkalmazd az ageLOC Body Serumot kellő mennyiségben a célterületeken (pl. felkarok, felső comb/fenek vagy has), és kezd meg az ageLOC WellSpa iO rutint. Finom, körkörös mozdulatokkal mozgasd a készüléket felfelé, a test középpontja felé, majd lefelé. A program alatt vigyél fel további szérumot, ha szükséges, hogy biztosítsd a bőr és a készülék közti sima, folyamatos érintkezést. Masszírozd a bőrbe a maradék szérumot. Utolsó lépésként masszírozd a bőrbe az ageLOC Dermatic Effects feszesítő testápolót határozott, felfelé irányuló, körkörös mozdulatokkal.

HELYREÁLLÍTÓ ÉS LAZÍTÓ RUTIN

ageLOC WellSpa iO készülék + ageLOC Body Activating Gel

Vigyél fel kellő mennyiségű ageLOC Body Activating Gelt a célterületekre, tiszta bőrre. Használd az ageLOC WellSpa iO készülékkel együtt.

A helyreállító rutin során csúsztasd a készüléket gyengéden a kiválasztott testfelületen hosszú, felfelé irányuló mozdulatokkal. Ezután fordítsd el a készüléket, és haladj így tovább a következő szakaszon, amíg nem végzel a teljes testfelülettel. Masszírozd a bőrbe a maradék gélt. Használd legfeljebb napi egy alkalommal.

A lazító rutin során csúsztasd a készüléket gyengéden a kiválasztott testfelületen lassú, körkörös mozdulatokkal felfelé, különös tekintettel a feszült területekre. Ezután fordítsd el a készüléket, és haladj így tovább a következő szakaszon, amíg nem végzel a teljes testfelülettel. Masszírozd a bőrbe a maradék gélt. Használd legfeljebb napi egy alkalommal.

MEGJEGYZÉS: A teljes használati útmutatóért csatlakozz a Nu Skin Vera apphoz, vagy tekintsd meg az ageLOC WellSpa iO kézikönyvét.

AZ AGELOC TERMÉKEKBEN REJLŐ VARÁZSERŐ

AGELOC BODY SERUM

Az ageLOC WellSpa iO készülékkel való együttes használatra tervezett ageLOC Body Serum a narancsbőrt veszi célba. Kontúrosabbá és ragyogóbbá varázsolja a bőrt, javítva az általános megjelenésén. Nemcsak a bőr láthatóan feszesebbé tételét segíti, hanem hidratáló összetevők keverékével támogatja a bőr simaságát és javít a gödrös bőr megjelenésén a fiatalosabb külső érdekében.

- **Body Silhouette keverék** – egy növényi összetevőkből készült keverék, amely kifejezetten narancsbőrre készült. A keverék több tényezőt is célba vesz a bőr feszes, kontúros és megemelt megjelenéséért.
- **Mi peptid** – egy egyedülálló, természetes oligopeptid, amelyet mesterséges intelligencia segítségével azonosítottak, hogy javítsa a bőr feszességét és simaságát.
- **Caesalpinia spinosa gyümölcs és Kappaphycus alvarezii kivonat** – támogatják a bőr feszességét és bársonyosságát.
- **Bőrkondicionáló keverék** (napraforgó, makadámia, allantoin és panthenol) – javítja a bőr általános megjelenését.
- **ageLOC keverék** – a Nu Skin saját keveréke, amely a bőröregedés látható jeleit veszi célba a fiatalos külső megőrzése érdekében.

AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Az ageLOC Body Activating Gel a helyreállító és pihentető ageLOC WellSpa iO rutinokkal alkalmazva hűsíti a bőrt. Az ageLOC WellSpa iO készülékkel való együttes használatra alkottuk meg.

- **WellBe keverék** – Crithimum maritimum és ashwaganda gyökérkivonat (Withania Somnifera gyökérkivonat) gondosan összeállított keveréke, amely segít az általános jó közérzet elérésében.
- **ageLOC keverék** – a Nu Skin saját összetevő-keveréke, amely a bőrregeedés látható jeleit veszi célba a fiatalos külső megőrzése érdekében.

PRÓBÁLD KI EZEKET IS*

- ageLOC Body Polish
- ageLOC Dermatic Effects®
- Epoch® IceDancer Invigorating Leg Gel Élénkítő lábápoló zselé
- Beauty Focus MultiBeauty

*A termékek helyi elérhetőségével kapcsolatban keresd fel a piacod weboldalát!

ISMERD MEG JOBBAN

Hogyan lehetséges a szépségápolás és a wellness integrálása egyetlen készülék-rendszerben?

Ökoszisztémaként tekintünk a testünkre, ezért olyan holisztikus megoldásokra vágyunk, amelyek megfelelnek a fejlődő személyes jóléti igényeinknek. Az ageLOC WellSpa iO rendszer pont ilyen. Az ageLOC formuláktól kezdve a készülék egyedi kialakításán és az alkalmazkodó mikroáramon keresztül a csatlakozott iO élményig, az ageLOC WellSpa iO rendszer olyan revitalizáló, helyreállító és pihentető szépségápolási wellness előnyökkel szolgál, amelyek segítenek, hogy jól érezd magad, és jól is nézz ki.

Mitől olyan egyedülálló az ageLOC WellSpa iO System?

Az ageLOC WellSpa iO rendszer az otthoni wellnessfürdő-élmény újragondolása. A készülékhez tartozó termékek (az ageLOC Body Serum és az ageLOC Body Activating Gel) kellemes élményt nyújtanak a gondosan kiválasztott összetevőikkel, és nem kell lemosni őket. Ezzel egy időben az ageLOC Body Polish tisztítja és hámlasztja a bőrt a sima és ragyogó megjelenésért, míg az ageLOC Dermatic Effects mindennapos feszesítő testápoló javítja a bőr feszességét. Az ageLOC WellSpa iO készülék egy különleges, szabadalmaztatás alatt álló fémes domborulattal rendelkezik, amely gondoskodik a sima és kellemes masszírozásról, miközben hozzájárul a bőr stimulálásához. Ez a fémes domborulat remekül illeszkedik a test vonalaira, és selymesen siklik a bőrön. A készülék adaptív mikroárammal (adaptív kétfázisú pulzáló mikroáram) működik, amely folyamatosan, minden rutin alatt alkalmazkodik a bőr változó vezetőképességéhez, hogy optimális, személyre szabott és kellemes élményt nyújtson. Ez a rendszer nem csupán a bőr kontúrosabbá és szebbé tételét segíti, de revitalizáló hatással is bír az általános jóllét fokozásáért, valamint lehetővé teszi, hogy személyre szabd a szépségápolási és wellness rutinodat.

Miben különbözik az ageLOC WellSpa iO-ban használt mikroáram attól, amellyel az ageLOC Galvanic Body Spa működik?

Az ageLOC Galvanic Body Spa pulzáló egyenárammal működik, míg az ageLOC WellSpa iO adaptív mikroáramot használ. Ez egy kétfázisú pulzáló áram, amely folyamatosan, valós időben igazodik a bőr vezetőképességéhez. Ez pedig azt jelenti, hogy mindig a megfelelő áramerősséggel működik, biztosítva a folyamatos kellemes érzést.

Maximum mennyi ideig használható az ageLOC WellSpa iO rendszer?

Az ageLOC WellSpa iO készülékrendszert legfeljebb 5 percig használhatod az egyes testfelületeken. Mindenképpen tartsd be a használati utasítást!

Hogyan mozgassam az ageLOC WellSpa iO-t a különböző rutinokban?

A revitalizáláshoz felfelé és/vagy befelé irányuló, gyengéd masszírozó mozdulatokkal használd a készüléket, hogy ezáltal javítsd a bőr megjelenését.

Ha a közérzeteden szeretnél javítani, illetve egy egész célterületen használnád (pl. az egész combon vagy karon), akkor egyszerű felfelé és befelé irányuló mozdulatokkal dolgozz. A pihentető rutin alatt a különböző izomcsoportokon használd, amelyek a gyengéd masszázs hatására tudnak ellazulni. Apróbb, körkörös, felfelé és befelé irányuló mozdulatokat végezz.

Miért rendelkezik ilyen különös formával a fémes domborulat?

Az ageLOC WellSpa iO készülék a maga nemében egyedülálló, fémes domborulattal rendelkezik, amely gondoskodik a masszázs gördülékenységről és kellemes érzetéről, és hozzájárul a bőr stimulálásához. A készüléket úgy terveztük, hogy optimálisan illeszkedjen a test kontúrvonalaira, és szépen csússzon a bőrön.

Az ageLOC WellSpa iO használatához csatlakoztatnom kell az alkalmazáshoz?

Csatlakozás nélkül is részesülsz a szépségápolási és wellness előnyökben. Ugyanakkor az ageLOC WellSpa iO képes a csatlakozásra, és érdemes kihasználnod az összes funkcióját, beleértve a személyre szabott alkalmazási célokat, az útmutatót, a személyre szabott rutinokat és a használat nyomon követését.

Honnan tudom, hogy melyik a megfelelő rutin a számomra?

Szépségápolási és wellness igényeidet te ismered a legjobban, és a Vera appban számtalan rutin közül választhatsz. Próbáld ki mindet, és így egészen biztosan az összes előnyben részesülni fogsz – a bőröd és a tested hálás lesz érte!

Miben támogatja az ageLOC WellSpa iO készülék a Nu Skint abban az ígértben, hogy még fenntarthatóbbá teszi a termékeket?

Bolygónk felelős gondviselőjeként az ageLOC WellSpa iO készüléket tölthető akkumulátorral terveztük, ami növeli a készülék élettartamát. Kérjük, ellenőrizd a helyi lehetőségeket, és hasznosítsd újra a készüléket, ha lehetséges! Az újrahasznosítással kapcsolatos további információkat és részleteket a www.nuskin.com/sustainability oldalon találod.

TARTALMA

AGELOC BODY SERUM

Összetevők: Aqua, Glycerin, Propanediol, Pentylene Glycol, PEG-16 Macadamia Glycerides, PEG-10 Sunflower Glycerides, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Panthenol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Arginine, Allantoin, Caprylyl Glycol, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Kappaphycus Alvarezii Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Crithmum Maritimum Extract, Oligopeptide-1, Hydroxyacetophenone, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tocopherol, Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether, Carbomer, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Benzyl Salicylate.

AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Összetevők: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Fructose, Caprylyl Glycol, Allantoin, Bisabolol, Panthenol, Withania Somnifera Root Extract, Sodium PCA, Oryza Sativa Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Crithmum Maritimum Extract, Carbomer, Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene.

Szkennezd be a QR-kódot, és csatlakozz a Verához

