

# AGELOC WELLSPA iO -JÄRJESTELMÄ

ageLOC WellSpa iO -järjestelmä tarjoaa enemmän etuja, joita tarvitaan kukoistukseen. Se on yksilöllinen kauneushoito-, hyvinvointi- ja itsehoitolaite palautumiseen, virkistymiseen ja rentoutumiseen, jotta tunnet olosi mahdollisimman hyväksi ja myös näytät siltä.



## TUTUSTU AGELOC WELLSPA IO -JÄRJESTELMÄÄN

Tervetuloa itsehoidon tulevaisuuteen. ageLOC WellSpa iO -järjestelmä hyödyntää (i) älykästä itsestä huolehtimista näkyvästi kiinteämmän ja sileämmän ihon sekä nuorekkaamman, eloisan ulkonäön saamiseksi.

Järjestelmän edut keskittyvät kolmen tärkeän asian ympärille: elvytys, palautus ja rentoutuminen. Olipa kyseessä ihosi ilmeen **elvyttäminen** itseluottamuksesi vahvistamiseksi, yleisen hyvinvoinnin tunteesi **palauttaminen** tai kehosi **rentoutuminen** liikunnan tai pitkän päivän jälkeen – voit tehostaa kauneushoidon ja hyvinvoinnin rituaalejasi ageLOC WellSpa iO -järjestelmän avulla.

Tämä eksklusiivinen laitejärjestelmä koostuu ageLOC-kosmetiikkatuotteista, joiden tieteellisesti todistetut edut voi tuntea ja nähdä, IoT-yhdistetystä sovelluksesta, joka toimii ohjaavana kumppanina, ja laitteeseen integroidusta personoidusta adaptiivisesta mikrovirtateknologiasta, jonka avulla voidaan miellyttävästi säätää iholle johdetun virran intensiteettiä reaaliajassa.

Päästä ainutlaatuinen itsevarmuutesi valloilleen ageLOC WellSpa iO -järjestelmän tukemana.

## IHASTU

### ELVYTTÄVÄT HYÖDYT

ageLOC WellSpa iO -laite + ageLOC Body Serum

- Elvyttää ihon ulkonäköä ja tukee itsevarmuuden tunnetta.
- Se on suunniteltu iholle, jolla näkyy selluliittia, ja auttaa tasoittamaan ja kiinteyttämään ihoa saaden sen näyttämään hehkuvalta ja sileämmältä.
- Kiinteyttää ja kiristää reisien, vatsan ja käsivarsien ihoa näkyvästi antaen nuorekkaamman ulkonäön.
- Auttaa ravitsemaan ihoa edistämällä puhdasta, sileää ja terveemmän näköistä ihoa.
- Auttaa parantamaan velton ihon ulkonäköä ja saa ihon näyttämään muotoillulta.
- Tasoittaa ihon sävyä tehden ihosta näkyvästi kirkkaamman ja eloisan.
- Kosteuttaa ja auttaa vähentämään ihon epätasaista ulkonäköä.
- Keskittyy ikääntymisen näkyvien merkkien alkulähteille säilyttäen ihon nuorekkuuden ja vähentäen ikääntymisen näkyviä merkkejä ageLOC-ainesosien avulla.

## PALAUTTAVAT HYÖDYT

ageLOC WellSpa iO -laite + ageLOC Body Activating Gel

- Palauttaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tunteen ja tukee holistista hyvinvointia.
- Laitteen ihoa hierovat liikkeet auttavat parantamaan ihon kerrosten ja sidekudoksen verenkiertoa.
- Manuaalinen hierontaliike auttaa vähentämään ihon ulkonäön turvonneisuutta ja tekee ilmeestä sileämmän.
- Tukee kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin tunteita ja auttaa sinua näyttämään paremmalta ja tuntemaan olosi paremmaksi.
- Antaa rauhallisemman ja tasapainoisemman tunteen.
- Keskittyy ikääntymisen näkyvien merkkien alkulähteille säilyttäen ihon nuorekkuuden ja vähentäen ikääntymisen näkyviä merkkejä ageLOC-ainesosien avulla.

## RENTOUTTAVAT HYÖDYT

ageLOC WellSpa iO -laite + ageLOC Body Activating Gel

- Tukee kehoasi auttaen sitä voimaan paremmin ennen ja jälkeen kuntoilun.
- Hieroo ennen kuntoilua erinomaisella tavalla manuaalisesti auttaen lihaksia tuntumaan virkeiltä ja valmiilta treeniin.
- Hieroo kuntoilun jälkeen erinomaisella tavalla manuaalisesti auttaen rentouttamaan kipeitä lihaksia ja edistämään rentoutumista.
- Sen avulla tunnet olosi virkistyneeksi ja rentoutuneeksi pitkän päivän jälkeen.

## LAITTEEN OMINAISUUDET

- Pinnan muotoilu antaa mukavan tasaisen kokemuksen.
- Ainutlaatuinen, yhdysvaltalaisista patentteja odottava metallipäämalli suunniteltiin optimoimaan virran kulku ja auttamaan sujuvassa ja mukavassa manuaalisessa hieronnassa sekä edistämään ihon stimulointia. Se on suunniteltu sopimaan täydellisesti vartalon muotoihin ja liukumaan sujuvasti iholla.
- Patenttia odottava<sup>1</sup>, adaptiivinen kaksivaiheinen, sykäyksittäin toimiva mikrovirta mukautuu jatkuvasti ja mukavasti ihoosi reaaliajassa – jotta saat optimoidun, juuri itsellesi sopivan WellSpa iO -järjestelmäsessioita joka kerta.
- Silikoniholkki on suunniteltu helpottamaan puhdistusta ja minimoimaan sotku.

## NU SKININ VERA-SOVELLUKSEN OMINAISUUDET

- Mukautuu ja viimeistelee elvyttävän, palauttavan ja rentouttavan hoidon aikana. Opastaa selkeästi jokaisessa vaiheessa reaaliaikaisten ohjattujen tutoriaalien avulla.
- Antaa räätälöidyn iO-tuloksen, joka auttaa sinua ylläpitämään motivaatiotasi ja saavuttamaan kauneudenhoito- ja hyvinvointituotteiden käyttötavoitteesi.
- Auttaa seuraamaan yksilöllistä käyttöäsi hauskoilla, kannustavilla merkeillä.
- Tarjoaa helpon uudelleentilauksen, jolloin tuotteesi ovat aina käden ulottuvilla.
- Sovellus ja laiteohjelmiston päivitykset optimoivat jatkuvasti rutiinejasi.


<sup>1</sup> Yhdysvalloissa ja muilla markkina-alueilla ympäri maailmaa

Tämä asiakirja on tarkoitettu Nu Skinin Euroopan (Ukrainaa lukuun ottamatta) ja Etelä-Afrikan henkilökunnan ja itsenäisten brändikumppanien käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu yleiseen levitykseen. Katso [www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)-sivuston tavaramerkkisanaston sivulta luettelo kaikista Nu Skinin Euroopan ja Etelä-Afrikan markkina-alueilla rekisteröidyistä tavaramerkeistä.


## KLIINISTEN TESTIEN TULOKSET, JOTKA TODISTAVAT TEHON ELVYTTÄVÄN HOITO-OHJELMAN TUTKIMUS

On tehty in vivo -tutkimus, jossa 25–60-vuotiaita naispuolisia koehenkilöitä, joilla oli vähän tai kohtalaisesti selluliittia reisien yläosissa, olkavarsissa ja/tai vatsassa, rekrytoitiin käyttämään ageLOC WellSpa iO -hoito-ohjelmaa. 33 heistä käytti seuraavaa hoito-ohjelmaa: ageLOC Body Polish kuorivana puhdistusaineena kolme kertaa viikossa edellä mainituille alueille, WellSpa iO -laite ageLOC Body Serumin kanssa kolmen minuutin ajan kolme kertaa viikossa sekä ageLOC Dermal Effects kahdesti päivässä. Jokainen alue arvioitiin käyttäen kliinistä arvosteluasteikkoa ja itsearviota lähtötilanteessa ja viikoilla kaksi, neljä, kahdeksan ja kaksitoista. Yläreiden takaosa arvioitiin myös kutometrilaitteiden avulla samoina ajankohtina.

Alla esitetään kutometritulokset, jotka kuvaavat reiden ihon kiinteyden ja joustavuuden paranemisesta.

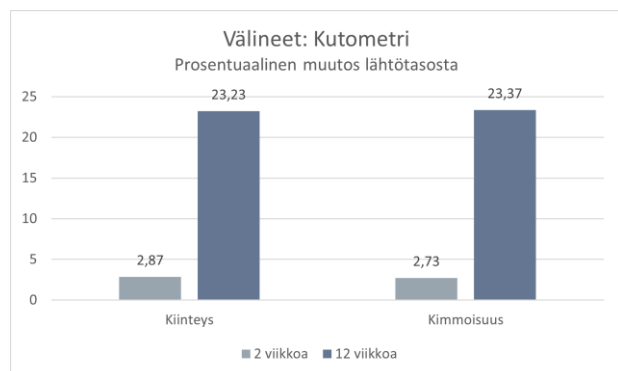

Kliininen arvioija arvioi selluliitin esiintymistä kullakin alueella. Alla on esitys reidessä näkyvistä muutoksista.

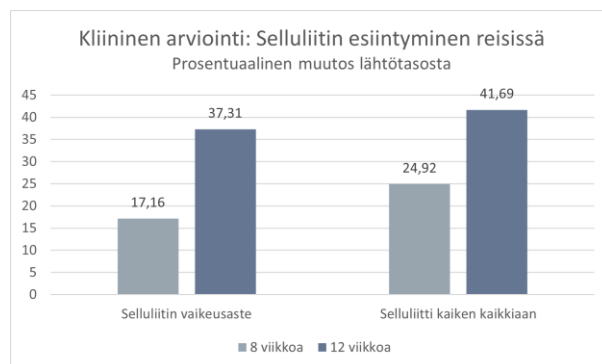

Koehenkilöt huomasivat parannuksia ihonsa ulkonäössä myös seuraavien ominaisuuksien osalta kullakin alueella:

- Selluliitti
- Kiinteys
- Muoto
- Yleinen ulkonäkö
- Sileyks
- Kosteutus
- Kireys

Osana samaa tutkimusta toisen 32 naispuolisesta koehenkilöstä koostuneen ryhmän keskuudessa, joka noudatti samaa elvyttävää hoito-ohjelmaa, tutkimuksessamme havaittiin myös, että kun ageLOC WellSpa iO -laitteen ja ageLOC Body Serumin käyttöihyettä lisättiin (enintään viisi kertaa viikossa) ja ajoitusta (5 minuuttia vartalon aluetta kohden), hyödyt havaitaan nopeammin ja tulokset 12 viikon jälkeen ovat parempia.

## KÄYTTÖOHJEET

Katso ennen käyttöä turvallisuutta koskevat tiedot ageLOC WellSpa iO -järjestelmän käyttöohjeesta sekä käyttöohjeet Vera-sovelluksesta. Minkä rutiinin valitsetkin, olemme suunnitelleet ylelliset, iholle jätettävät tuotteemme ageLOC-ainesosilla, jotka keskittyvät ihon ikääntymisen näkyviin merkkeihin nuorekkaan ulkonäön säilyttämiseksi.

## ELVYTTÄVÄ HOITO-OHJELMA

ageLOC Body Polish + ageLOC WellSpa iO -laite + ageLOC Body Serum + ageLOC Dermatic Effects

Käytä kolme kertaa viikossa tai enintään päivittäin. Kun olet puhdistanut ihon suihkussa ageLOC Body Polishilla ja taputellut ihon kuivaksi, levitä riittävä määrä ageLOC Body Serumia haluamiisi kohtiin (esim. käsivarsien yläosiin, reisien yläosiin / pakaroihin tai vatsalle) ja aloita ageLOC WellSpa iO -hoitosi. Liu'uta laitetta iholla kevyesti ylöspäin kohti vartalon keskiosia ja takaisin alaspäin hitain, pyörivin liikkein. Lisää seerumia tarvittaessa hoitokerran aikana liukuvan ja tasaisen kosketuspinnan varmistamiseksi ihon ja laitteen välillä. Hiero mahdollinen ylimääräinen seerumi iholle. Levitä viimeisenä vaiheena ageLOC Dermatic Effects hieromalla sitä iholle lujin, ylöspäin suuntautuvien pyörivin liikkein.

## PALAUTTAVAT JA RENTOUTTAVAT HOITO-OHJELMAT

ageLOC WellSpa iO -laite + ageLOC Body Activating Gel

Levitä riittävä määrä ageLOC Body Activating Geliä haluamiisi kohtiin puhtaalle iholle. Käytä yhdessä ageLOC WellSpa iO -laitteen kanssa.

Jos haluat palauttavan hoito-ohjelman, liu'uta laitetta kevyesti vartalolla pitkin ja ylöspäin suuntautuvien vedoin. Käännä sitten laitetta ja siirry seuraavaan kohtaan. Jatka, kunnes olet käsitellyt vartalon alueen kauttaaltaan. Hiero mahdollinen ylimääräinen geeli ihoon. Käytä enintään kerran päivässä.

Jos haluat rentouttavan hoito-ohjelman, liu'uta laitetta kevyesti vartalolla hitain ja ylöspäin suuntautuvien pyörivin vedoin kiinnittäen erityistä huomiota kireisiin alueisiin. Käännä sitten laitetta ja siirry seuraavaan kohtaan. Jatka, kunnes olet käsitellyt vartalon alueen kauttaaltaan. Hiero mahdollinen ylimääräinen geeli ihoon. Käytä enintään kerran päivässä.

HUOM: Yhdistä Nu Skin Vera -sovellukseen tai katso kattavat käyttöohjeet ageLOC WellSpa iO -laitteen käyttöohjeesta.

## MISTÄ AGELOC-TUOTTEET SAAVAT TEHONSA

### AGELOC BODY SERUM

ageLOC WellSpa iO -laitteen kanssa käytettävä ageLOC Body Serum on suunniteltu iholle, jolla näkyy selluliittia. Se tukee ihon näkyvää muotoilua, kirkkaampaa ihoa ja ihon parempaa yleistä ulkonäköä. Tuote auttaa kiinteyttämään ja kiristämään ihoa näkyvästi, ja se sisältää kosteuttavien ainesosien yhdistelmän, joka tukee ihon sileyttä ja parantaa epätasaisen ihon ulkonäköä saaden ihon näyttämään nuorekkaammalta.

- **Body Silhouette Blend** – huolella valikoitu kasvipiperäisten ainesosien sekoitus, joka on suunniteltu selluliitti-iholle. Sekoituksen teho kohdistuu useisiin tekijöihin ihon kiinteän, muotoillun ja kohotetun ulkonäön paljastamiseksi.
- **AI-peptidi** – ainutlaatuinen luonnollinen tekoälyn tunnistama oligopeptidi, joka parantaa ihon kiinteää ja sileää ulkonäköä.
- **Orakesalpinan hedelmäuute ja Kappaphycus Alvarezii -sammaluute** – auttavat parantamaan ihon kiinteyttä ja sileyttä.
- **Ihoa hoitava sekoitus** (auringonkukka, makadamia, allantoiini ja pantenoli) – avuksi ihon yleisen ulkonäön parantamiseen.
- **ageLOC-sekoitus** – yksinoikeudella valmistettu sekoitus, joka keskittyy ihon ikääntymisen näkyviin merkkeihin ihon nuorekkaan ulkonäön säilyttämiseksi.

## AGELOC BODY ACTIVATING GEL

ageLOC Body Activating Gel jättää iholle viilentävän tunteen elvyttävän ja rentouttavan ageLOC WellSpa iO -rutiinin jälkeen. Se on suunniteltu käytettäväksi yhdessä ageLOC WellSpa iO -laitteen kanssa.

- **WellBe-sekoitus** – huolella valikoitu merifenkolin ja Ashwagandha-juuriuutteiden (rohtokoision juuriuute) sekoitus, joka auttaa edistämään kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin tunteita.
- **ageLOC-sekoitus** – yksinoikeudella valmistettu sekoitus, joka keskittyy ihon ikääntymisen näkyviin merkkeihin ihon nuorekkaan ulkonäön säilyttämiseksi.

## KOKEILE SITÄ NÄIDEN KANSSA\*

- ageLOC Body Polish
- ageLOC Dermatic Effects®
- Epoch® IceDancer Invigorating Leg Gel
- Beauty Focus Multibeauty

\* Katso tuotteiden paikallinen saatavuus oman markkina-alueesi verkkosivustolta.

## LISÄTIETOA

**Miten kauneudenhoidon ja hyvinvoinnin saa integroitua samaan laitejärjestelmään?**

Pidämme kehojamme ekosysteeminä, ja haluamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka täydentävät kehittyviä henkilökohtaisia hyvinvointitarpeitamme. AgeLOC WellSpa iO -järjestelmä toimii juuri siten. ageLOC WellSpa iO -järjestelmä tarjoaa elvyttäviä, palauttavia ja rentouttavia kauneudenhoito- ja hyvinvointitietoja, jotka auttavat sinua näyttämään hyvältä ja tuntemaan olosi hyväksi – upeista ageLOC-koostumuksista laitteen ainutlaatuisen muotoiluun, adaptiiviseen mikrovirtaan ja yhdistettyyn iO-kokemukseen.

**Millä tavalla ageLOC WellSpa iO -järjestelmä on ainutlaatuinen?**

ageLOC WellSpa iO -järjestelmä on kuin uudenlainen kotikylpyläkokemus. Laitteen kanssa käytettävät ajankohtaiset tuotteet (ageLOC Body Serum ja ageLOC Body Activating Gel) tarjoavat saumattoman käyttökokemuksen huolellisesti valittujen iholle jätettävien ainesosien ansiosta. Samaan aikaan ageLOC Body Polishilla on muitakin etuja: se puhdistaa ja hioo ihoa antaen sille sileän ja hohtavan pinnan, kun taas ageLOC Dermatic Effects saa ihon näyttämään kiinteämmältä päivittäisenä vartaloa muovaavana voiteena. AgeLOC WellSpa iO -laitteessa on ainutlaatuiset, patenttia odottavat metallipäät, jotka auttavat sujuvassa ja mukavassa hieronnassa sekä edistävät ihon stimulointia. Näiden metallipäiden ainutlaatuinen muotoilu sopii optimaalisesti kehon muotoihin ja liukuu pehmeästi iholla. Laite hyödyntää myös adaptiivista mikrovirtaa (adaptiivista kaksivaiheista, sykäyksittäin toimivaa mikrovirtaa), joka mukautuu jatkuvasti ihosi muutoksiin ihon johtavuudessa jokaisen hoitajakson aikana tarjoten sinulle optimaalisen, personoidun ja mukavan kokemuksen. Sen lisäksi, että järjestelmä auttaa silottamaan ja kaunistamaan ihoa, se myös elvyttää sitä antaen kokonaisvaltaisesti kohottavan kokemuksen ja voimaannuttaa sinua tekemään matkastasi kauneudenhoidon ja hyvinvoinnin parissa yksilöllisen.

**Miten ageLOC WellSpa iO:n mikrovirta poikkeaa ageLOC Galvanic Body Spasta?**

ageLOC Galvanic Body Spa hyödyntää sykäyksittäin toimivaa tasavirtaa, kun taas ageLOC WellSpa iO käyttää adaptiivista mikrovirtaa. Se on kaksivaiheista, sykäyksittäin toimivaa virtaa, joka mukautuu jatkuvasti reaaliajassa ihon johtavuuteen. Laite pystyy mukautumaan ihon johtavuuteen ja pystyy siten tarjoamaan optimaalisen virran intensiteetin mukavuudesta tinkimättä.

## Mikä on suositeltava enimmäisaika ageLOC WellSpa iO -järjestelmän käytölle?

Voit käyttää ageLOC WellSpa iO -laittejärjestelmääsi enintään 5 minuutin ajan kullakin kehon alueella. Muista noudattaa käyttöohjeita.

## Miksi ageLOC WellSpa iO:ta voi käyttää erilaisin liikkein?

Ulkonäkönsä elvyttämiseen pyrkivät haluavat käyttää ylös- ja/tai sisäänpäin suuntautuvia liikkeitä ja hieroa samalla aluetta hellävaraisesti ihon ulkonäön parantamiseksi.

Hyvinvointinsa palauttamista tavoitteleville ja koko alueeseen (esim. koko reiteen tai käsivarteen) keskittyville taas suositellaan pääasiassa ylös- ja sisäänpäin suuntautuvia perusliikkeitä. Rentouttavan rutiinin aikana teho kohdistetaan tiettyihin lihasryhmiin hellävaraisella hieronnalla, joka auttaa niitä rentoutumaan. Siksi toivotaan pienempiä, pyöreitä ja ylös-/sisäänpäin suuntautuvia liikkeitä.

## Miksi metallipäät ovat niin ainutlaatuisen muotoisia?

AgeLOC WellSpa iO -laitteen metallipäiden ainutlaatuinen muotoilu kehitettiin auttamaan sujuvassa ja miellyttävässä manuaalisessa hieronnassa, joka edistää ihon stimulointia. Laitte suunniteltiin sopimaan optimaalisesti kehon muotoihin ja liukumaan sujuvasti iholla.

## Onko minun muodostettava yhteys sovelluksella käyttäkseni ageLOC WellSpa iO:tani?

Voit edelleen nauttia kaikista upeista kauneutta ja hyvinvointia edistävästä hyödyistä, vaikka et muodostaisikaan yhteyttä. AgeLOC WellSpa iO on kuitenkin tarkoitettu yhteyden muodostamiseen, joten kannattaa hyödyntää kaikki sinua varten kehitetyt ominaisuudet, kuten personoitu käyttötavoitteiden asettaminen, ohjatut tutoriaalit, räätälöidyt rutiinit ja käytön seuranta.

## Mistä tiedän, mikä rutiini sopii minulle?

Sinä itse tunnet parhaiten omat kauneus- ja hyvinvointitavoitteesi, ja Vera-sovelluksessa on valittavissa runsaasti eri rutiineja. Kokeile vapaasti niitä kaikkia saadaksesi kaikki ne upeat hyödyt, joista ihosi ja vartalosi taatusti nauttivat.

## Miten ageLOC WellSpa iO -laite tukee Nu Skinin sitoutumista kestävään kehitykseen?

Maapallomme vastuullisina hoitajina olemme kehittäneet ageLOC WellSpa iO -laitteen, jonka ladattava akku tekee laitteesta entistäkin pitkäikäisemmän. Tarkista paikallisesta kierrätyslaitoksesta laitekierrätysvalmiudet ja kierrätä aina kun mahdollista. Katso osoitteesta [www.nuskin.com/sustainability](http://www.nuskin.com/sustainability) lisätietoja ja ohjeita kierrättämiseen.

## SISÄLTÖ

### AGELOC BODY SERUM

Ainesosat: Aqua, Glycerin, Propanediol, Pentylene Glycol, PEG-16 Macadamia Glycerides, PEG-10 Sunflower Glycerides, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Panthenol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Arginine, Allantoin, Caprylyl Glycol, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Kappaphycus Alvarezii Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Crithmum Maritimum Extract, Oligopeptide-1, Hydroxyacetophenone, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tocopherol, Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoyl Ether, Carbomer, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Benzyl Salicylate.

## AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Ainesosat: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Fructose, Caprylyl Glycol, Allantoin, Bisabolol, Panthenol, Withania Somnifera Root Extract, Sodium PCA, Oryza Sativa Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Crithmum Maritimum Extract, Carbomer, Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene.

Yhdistä Vera-sovellukseen skannaamalla QR-koodi

