

AGELOC WELLSPA iO SYSTEM

Das ageLOC WellSpa iO System bietet mehr von den Vorteilen, die man braucht, um sich wohlfühlen. Es ist ein personalisiertes Gerätesystem für Schönheit, Wellness und Selbstpflege, das dich revitalisiert, regeneriert und entspannt, damit du dich wohlfühlst und gut aussiehst.



LERNE DAS AGELOC WELLSPA IO SYSTEM KENNEN

Willkommen zur Zukunft der Selbstpflege. Das ageLOC WellSpa iO System sorgt für (i) intelligente Selbstpflege und (o) sichtbar festere und straffere Haut für ein jugendlicheres, lebendigeres Aussehen.

Die Vorteile des Systems drehen sich um die drei großen Rs: Revitalize, Restore und Relax. Ob es darum geht, **dein Hautbild zu revitalisieren** und damit dein Selbstbewusstsein zu stärken, **dein allgemeines Wohlbefinden wiederherzustellen** oder **deinen Körper nach dem Sport oder einem langen Tag zu entspannen** – mit dem ageLOC WellSpa iO System kannst du deine Schönheits- und Wellness-Rituale optimieren.

Dieses exklusive Gerätesystem verfügt über ageLOC Kosmetikprodukte, die wissenschaftlich nachgewiesene Vorteile bieten, die du fühlen und sehen kannst, eine IoT-App, die dich begleitet, und eine personalisierte adaptive Mikrostromtechnologie, die in das Gerät integriert ist, um die Stromstärke in Echtzeit an die Leitfähigkeit deiner Haut anzupassen.

Entfalte dein einzigartiges Selbstbewusstsein mit der Hilfe des ageLOC WellSpa iO Systems.

NICHT UMSONST EIN FAVORIT

REVITALISE-VORTEILE

ageLOC WellSpa iO Gerät + ageLOC Body Serum

- Revitalisiert das Erscheinungsbild deiner Haut und sorgt für ein Gefühl von Selbstvertrauen.
- Entwickelt für Haut mit Cellulite-Erscheinungen, strafft und konturiert das System die Haut sichtbar und sorgt für ein strahlendes, glatteres Hautbild.
- Die Haut an Oberschenkeln, Bauch und Armen wird sichtbar gestrafft und gefestigt und erhält ein jugendlicheres Aussehen.
- Hilft, die Haut mit Nährstoffen zu versorgen und fördert eine klare, ebenmäßige und gesünder aussehende Haut.
- Verbessert das Erscheinungsbild schlaffer Haut und sorgt für eine straffe und wohlgeformte Haut.
- Gleicht den Farbton der Haut aus und sorgt für eine sichtbar strahlendere, lebendige Haut.
- Spendet Feuchtigkeit und hilft, die Alterungserscheinungen der Haut zu reduzieren.
- Zielt auf die Ursachen der sichtbaren Zeichen der Hautalterung ab, um das jugendliche Aussehen zu bewahren, und reduziert dank der ageLOC Wirkstoffe das Auftreten von Hautalterungserscheinungen.

RESTORE-VORTEILE

ageLOC WellSpa iO Gerät + ageLOC Body Activating Gel

- Stellt das allgemeine Wohlbefinden wieder her für ein besseres ganzheitliches Wellness-Gefühl.
- Fördert die Durchblutung der Hautschichten und des Bindegewebes dank der Massagebewegung des Geräts auf der Haut.
- Hilft, durch die manuelle Massagebewegung das Erscheinungsbild der Haut zu entschlacken und sie ebenmäßig aussehen zu lassen.
- Fördert das allgemeine Wohlbefinden und hilft dir, besser auszusehen und dich besser zu fühlen.
- Hilft dir, dich ruhiger und ausgeglichener zu fühlen.
- Zielt auf die Ursachen der sichtbaren Zeichen der Hautalterung ab, um das jugendliche Aussehen zu bewahren, und reduziert dank der ageLOC Wirkstoffe das Auftreten von Hautalterungserscheinungen.

RELAX-VORTEILE

ageLOC WellSpa iO Gerät + ageLOC Body Activating Gel

- Hilft deinem Körper, sich vor und nach dem Training besser zu fühlen.
- Ermöglicht eine tolle manuelle Massage vor dem Training, damit sich deine Muskeln gestärkt und bereit für den nächsten Schritt fühlen.
- Die manuelle Massage nach dem Training hilft, Muskelkater zu lindern und fördert die allgemeine Entspannung.
- Hilft dir, dich nach einem langen Tag erfrischt und entspannt zu fühlen.

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- Das Oberflächendesign sorgt für ein geschmeidiges, komfortables Erlebnis.
- Das einzigartige, zum US-Patent angemeldete Design mit metallischen Massagepunkten wurde entwickelt, um den Stromfluss zu optimieren und eine sanfte, angenehme manuelle Massage zu ermöglichen und gleichzeitig zur Stimulation der Haut beizutragen. Das Gerät passt sich perfekt den Konturen deines Körpers an und gleitet sanft über deine Haut.
- Der zum Patent angemeldete¹ adaptive, biphasisch pulsierende Mikrostrom passt sich kontinuierlich und komfortabel in Echtzeit an deine Haut an – für eine optimierte, genau auf dich abgestimmte WellSpa iO System Session, bei jeder Anwendung.
- Die Silikonhülle wurde entwickelt, um die Reinigung zu vereinfachen und die Verschmutzung zu minimieren.

EIGENSCHAFTEN DER NU SKIN VERA APP

- Lässt sich individuell anpassen und begleitet dich bei deinen Revitalise-, Restore- und Relax-Routinen. Begleitet dich mit geführten Echtzeit-Tutorials durch die einzelnen Schritte.
- Du erhältst einen persönlichen iO Score, der dir hilft, motiviert zu bleiben und deine Anwendungsziele für Beauty und Wellness zu erreichen.
- Protokolliert deine individuelle Nutzung und liefert dir mit Spaß motivierende Badges.
- Bietet eine einfache Nachbestellung, damit du deine Produkte immer zur Hand hast.
- Bietet kontinuierliche Optimierung durch Updates für die App und das Gerät.


¹ In den USA und anderen Märkten weltweit

*Dieses Dokument ist für Beschäftigte von Nu Skin und unabhängige Vertriebspartner*innen in Europa (ohne Ukraine) und Südafrika bestimmt. Es ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Auf der Warenzeichen-Glossarseite unter www.nuskin.com befindet sich eine Liste aller eingetragenen Warenzeichen in Südafrika und den europäischen Märkten von Nu Skin.*


KLINISCH NACHGEWIESENE ERGEBNISSE REVITALISE-STUDIE

Es wurde eine In-vivo-Studie an weiblichen Probanden im Alter von 25–60 Jahren mit leichter bis mittlerer Cellulite an Oberschenkeln, Oberarmen und/oder Bauch durchgeführt, die für eine ageLOC WellSpa iO Routine ausgewählt worden waren. 33 von ihnen wendeten die folgende Routine an: ageLOC Body Polish als Peeling Cleanser, dreimal wöchentlich an den genannten Stellen, das WellSpa iO Gerät mit ageLOC Body Serum für drei Minuten, dreimal wöchentlich, und ageLOC Dermatic Effects zweimal täglich. Jeder Bereich wurde zu Beginn und in den Wochen zwei, vier, acht und zwölf anhand der klinischen Bewertung und der Selbstwahrnehmung beurteilt. Die Rückseite des Oberschenkels wurde ebenfalls zu denselben Zeitpunkten mit dem Messgerät (Cutometer) untersucht.

Die Cutometer-Ergebnisse, die die Verbesserungen der Hautfestigkeit und -elastizität an den Oberschenkeln veranschaulichen, werden im Folgenden dargestellt.

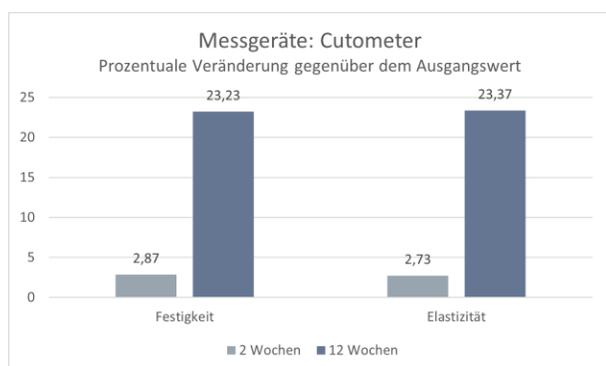

Der klinische Experte bewertete das Erscheinungsbild von Cellulite für die einzelnen Bereiche. Unten ist eine Darstellung der Veränderungen am Oberschenkel zu sehen.

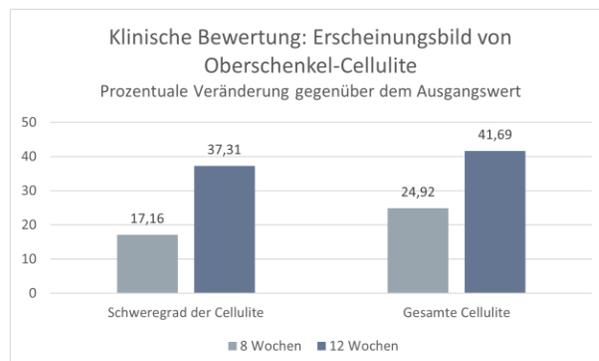

Die Probandinnen stellten zudem Verbesserungen ihres Hautbildes bei den folgenden Merkmalen der einzelnen Bereiche fest:

- Cellulite
- Festigkeit
- Konturierung
- Allgemeines Erscheinungsbild
- Ebenmäßigkeit
- Feuchtigkeitszufuhr
- Straffheit

Im Rahmen derselben Studie mit einer anderen Gruppe von 32 weiblichen Teilnehmern, die die Revitalise-Routine befolgten, wurde außerdem aufgezeigt, dass mit häufigerer Anwendung des ageLOC WellSpa iO Geräts + ageLOC Body Serum (maximal 5 Mal pro Woche) und dem richtigen zeitlichen Rahmen (5 Minuten pro Körperbereich), sich die positiven Auswirkungen schneller und mit besseren Ergebnissen über einen Zeitraum von 12 Wochen zeigen.

ANWENDUNG

Vor der Anwendung findest du in der ageLOC WellSpa iO Systemanleitung Sicherheitsinformationen und in der Vera App Hinweise zur Anwendung.

Für welches Programm du dich auch entscheidest, wir haben unsere luxuriösen Leave-on-Produkte mit ageLOC Wirkstoffformuliert, die auf die sichtbaren Zeichen der Hautalterung abzielen, um das jugendliche Aussehen zu erhalten.

REVITALISE-ROUTINE

ageLOC Body Polish + ageLOC WellSpa iO Gerät + ageLOC Body Serum + ageLOC Dermal Effects

Dreimal wöchentlich bis täglich anwenden. Nachdem du deine Haut unter der Dusche mit ageLOC Body Polish gereinigt und sanft abgetrocknet hast, trage eine ausreichende Menge ageLOC Body Serum auf die Zielbereiche (z. B. Oberarme, Oberschenkel/Po oder Bauch) auf und beginne deine ageLOC WellSpa iO Session. Lass das Gerät in langsamen, kreisenden Bewegungen über die Haut zur Körpermitte hinauf- und wieder hinuntergleiten. Trage während der Session bei Bedarf erneut Serum auf, um eine ebene, kontinuierliche Konnektivität zwischen der Haut und dem Gerät zu gewährleisten. Überschüssiges Serum in die Haut einmassieren. Als letzten Schritt trägst du ageLOC Dermal Effects auf, indem du die Creme in einer festen, kreisenden Bewegung nach oben massierst.

RESTORE- UND RELAX-ROUTINEN

ageLOC WellSpa iO Gerät + ageLOC Body Activating Gel

Trage eine ausreichende Menge ageLOC Body Activating Gel auf die gewünschten Zielbereiche der gereinigten Haut auf. Verwende dazu dein ageLOC WellSpa iO Gerät.

Bei der Restore-Routine lässt du das Gerät in langen, aufwärts gerichteten Bewegungen leicht über die Körperpartie gleiten. Anschließend das Gerät drehen, um den nächsten Abschnitt zu behandeln, bis der gesamte Körperbereich erfasst wurde. Überschüssiges Gel in die Haut einmassieren. Bis zu einmal täglich verwenden.

Für die Relax-Routine gleitest du das Gerät in langsamen, kreisenden Aufwärtsbewegungen über den Körper und achtest dabei besonders auf verspannte Stellen. Anschließend das Gerät drehen, um den nächsten Abschnitt zu behandeln, bis der gesamte Körperbereich erfasst wurde. Überschüssiges Gel in die Haut einmassieren. Bis zu einmal täglich verwenden.

HINWEIS: Stelle eine Verbindung zur Nu Skin Vera App her oder lies dir die ausführlichen Anwendungshinweise im ageLOC WellSpa iO Handbuch durch.

WIE UNSERE AGELOC PRODUKTE FUNKTIONIEREN

AGELOC BODY SERUM

Das ageLOC Body Serum wird mit dem ageLOC WellSpa iO Gerät verwendet und wurde für Haut mit Cellulite-Erscheinungen formuliert. Es hilft bei der sichtbaren Konturierung, Verbesserung der Strahlkraft der Haut sowie ihres allgemeinen Erscheinungsbildes. Das Serum hilft nicht nur, die Haut sichtbar zu straffen und zu festigen, sondern enthält auch eine Kombination aus feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen, die die Haut ebenmäßig macht und das Erscheinungsbild von faltiger Haut verbessert – für ein jugendlicheres Aussehen.

- **Body Silhouette Komplex** – eine sorgfältig zusammengestellte Mischung aus Pflanzenstoffen, die für Haut mit Cellulite entwickelt wurde. Der Komplex zielt auf mehrere Faktoren ab, um ein straffes, konturiertes und gestrafftes Hautbild zu erzielen.
- **Al-Peptid** – ein einzigartiges natürliches Oligopeptid, das mit Hilfe von KI identifiziert wurde, um die Festigkeit und Ebenmäßigkeit der Haut zu verbessern.
- **Caesalpinia Spinosa Frucht und Kappaphycus Alvarezii Extrakt** – hilft, die Festigkeit und Ebenmäßigkeit der Haut zu verbessern.
- **Skin Conditioning Komplex** (Sonnenblume, Macadamia, Allantoin und Panthenol) – hilft, das allgemeine Erscheinungsbild der Haut zu verbessern.
- **ageLOC Komplex** – eine spezielle Kombination von Inhaltsstoffen, die die sichtbaren Zeichen der Hautalterung bekämpft, um das jugendliche Aussehen zu bewahren.

AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Das ageLOC Body Activating Gel hinterlässt ein kühlendes Gefühl bei deinen ageLOC WellSpa iO Restore- und Relax- Routinen. Es enthält eine Formulierung, die mit dem ageLOC WellSpa iO Gerät funktioniert.

- **WellBe Komplex** – eine sorgfältig zusammengestellte Kombination aus Crithimum Maritimum und Ashwagandha Wurzelextrakten (Withania Somnifera Wurzelextrakt), die dazu beiträgt, das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.
- **ageLOC Komplex** – eine spezielle Kombination von Inhaltsstoffen, die die sichtbaren Zeichen der Hautalterung bekämpft, um das jugendliche Aussehen zu bewahren.

DAZU PASST*

- ageLOC Body Polish
- ageLOC Dermatic Effects®
- Epoch® IceDancer – Belebendes Gel für die Beine
- Beauty Focus Multibeauty

* Informiere dich auf der Website deines Marktes über die lokale Verfügbarkeit der Produkte.

MEHR ERFAHREN

Wie lassen sich Schönheit und Wellness in ein Gerätesystem integrieren?

Wir betrachten unseren Körper wie ein Ökosystem und wollen ganzheitliche Lösungen, die unsere sich entwickelnden persönlichen Bedürfnisse nach Wohlbefinden ergänzen. Das ageLOC WellSpa iO System macht genau das. Von den unglaublichen ageLOC Formeln bis hin zum einzigartigen Design des Geräts, dem adaptiven Mikrostrom und dem vernetzten iO-Erlebnis bietet das ageLOC WellSpa iO System revitalisierende, regenerierende und entspannende Schönheits- und Wellness-Vorteile, die dir helfen, besser auszusehen und dich besser zu fühlen.

Inwiefern ist das ageOC WellSpa iO System einzigartig?

Das ageLOC WellSpa iO System ist eine Neuinterpretation des Spa-Erlebnisses zu Hause. Die dazugehörigen Pflegeprodukte zur äußerlichen Anwendung (ageLOC Body Serum und ageLOC Body Activating Gel) bieten mit sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen ein nahtloses Leave-on-Erlebnis. Gleichzeitig reinigt und glättet ageLOC Body Polish die Haut für ein ebenmäßiges, strahlendes Finish, während ageLOC Dermatic Effects als tägliche Lotion zur Verbesserung der Konturen die Festigkeit der Haut verbessert. Das ageLOC WellSpa iO Gerät verfügt über einzigartige, zum Patent angemeldete metallische Massagepunkte, die für eine sanfte, angenehme Massage sorgen und gleichzeitig zur Stimulation der Haut beitragen. Das einzigartige Design dieser metallischen Massagepunkte passt sich optimal den Konturen deines Körpers an und gleitet sanft über deine Haut. Das Gerät verwendet außerdem einen adaptiven Mikrostrom (adaptiver biphasischer pulsierender Mikrostrom), der sich während jeder Session kontinuierlich an die Veränderungen der Leitfähigkeit deiner Haut anpasst, um dir ein optimales, individuelles und komfortables Erlebnis zu bieten. Dieses System hilft nicht nur, die Haut zu konturieren und zu verschönern, sondern es revitalisiert auch und gibt dir die Möglichkeit, deine Beauty- und Wellness-Reise ganz individuell zu gestalten.

Wie unterscheidet sich der Mikrostrom im ageLOC WellSpa iO vom ageLOC Galvanic Body Spa?

ageLOC Galvanic Body Spa verwendet einen pulsierenden Gleichstrom. ageLOC WellSpa iO hingegen verwendet einen adaptiven Mikrostrom. Das ist ein biphasisch pulsierender Strom, der sich kontinuierlich und in Echtzeit an die Leitfähigkeit der Haut anpasst. Dank der Fähigkeit, sich an die Leitfähigkeit der Haut anzupassen, kann das Gerät die optimale Stromstärke liefern, ohne dass der Komfort beeinträchtigt wird.

Wie lange sollte ich das ageLOC WellSpa iO System maximal anwenden?

Du kannst dein ageLOC WellSpa iO Gerätesystem bis zu 5 Minuten lang pro Körperbereich verwenden. Befolge bitte unbedingt die Anwendungshinweise.

Warum gibt es verschiedene Anwendungsbewegungen für ageLOC WellSpa iO?

Diejenigen, die ihr Aussehen revitalisieren wollen, sollten nach oben und/oder nach innen gerichtete Bewegungen verwenden und dabei den Bereich sanft massieren, um das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern.

Wer sein Wohlbefinden verbessern und einen ganzen Bereich (z. B. den ganzen Oberschenkel, den ganzen Arm) massieren möchte, sollte sich auf einfache nach oben und nach innen gerichtete Bewegungen konzentrieren. Bei einer Relax-Routine werden bestimmte Muskelgruppen durch eine sanfte Massage angesprochen, um sie zu entspannen. Deshalb sind kleinere, kreisende Bewegungen nach oben/innen wünschenswert.

Warum haben die metallischen Massagepunkte eine so einzigartige Form?

Das einzigartige Design der metallischen Massagepunkte des ageLOC WellSpa iO Geräts wurde entwickelt, um eine sanfte, angenehme manuelle Massage zu ermöglichen, die zur Hautsimulation beiträgt. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es sich den Konturen deines Körpers optimal anpasst und sanft über deine Haut gleitet.

Muss ich mich mit der App verbinden, um mein ageLOC WellSpa iO zu nutzen?

Du kommst auch ohne die App in den Genuss all der großartigen Schönheits- und Wellness-Vorteile. Allerdings wurde das ageLOC WellSpa iO für die Verbindung mit der App konzipiert, sodass du alle Funktionen nutzen kannst, die exklusiv für dich entwickelt wurden, wie z. B. das Festlegen persönlicher Anwendungsziele, geführte Anleitungen, individuelle Routinen und die Nachverfolgung der Anwendung.

Woher weiß ich, welche Routine die richtige für mich ist?

Du kennst deine Bedürfnisse in Bezug auf Schönheit und Wellness am besten und kannst in der Vera App aus einer Vielzahl von Routinen wählen. Du kannst sie alle ausprobieren, um alle Vorteile zu nutzen, von denen deine Haut und dein Körper sicher begeistert sein werden.

Wie trägt das ageLOC WellSpa iO Gerät zu Nu Skins Engagement für Nachhaltigkeit bei?

Als verantwortungsvolle Verfechter unseres Planeten haben wir das ageLOC WellSpa iO Gerät mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet, um die Langlebigkeit des Geräts zu erhöhen. Bitte informiere dich über die Recyclingmöglichkeiten für dein Gerät in deiner Nähe und recycle es, wo es möglich ist.

Auf www.nuskin.com/sustainability findest du weitere Informationen und Details zum Recycling.

WAS IST DRIN?

AGELOC BODY SERUM

Inhaltsstoffe: Aqua, Glycerin, Propanediol, Pentylene Glycol, PEG-16 Macadamia Glycerides, PEG-10 Sunflower Glycerides, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Panthenol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Arginine, Allantoin, Caprylyl Glycol, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Kappaphycus Alvarezii Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Crithmum Maritimum Extract, Oligopeptide-1, Hydroxyacetophenone, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tocopherol, Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether, Carbomer, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Benzyl Salicylate.

AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Inhaltsstoffe: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Fructose, Caprylyl Glycol, Allantoin, Bisabolol, Panthenol, Withania Somnifera Root Extract, Sodium PCA, Oryza Sativa Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Crithmum Maritimum Extract, Carbomer, Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene.

Scanne den QR-Code, um dich mit der Vera App zu verbinden

